stryker

Unity™ Coast™ Glider

Operations/Maintenance Manual

REF 3500



Symbols

Ţ <u>i</u>	Consult instructions for use
\triangle	Caution
REF	Catalogue number
SN	Serial number
S	Distributed by
	Manufacturer
US Patents	www.stryker.com/patents
<u>^</u>	Safe working load

3507009001-A EN

Table of Contents

Warning/Caution/Note Definition	2
Summary of safety precautions	
Introduction	
Product description	
Intended use	3
Expected service life	
Specifications	3
Contact information	
Serial number location	4
Accessories and parts	5
Preventive maintenance	
Cleaning with SideKick® wipes	7
Cleaning the product	8
Service Servic	
Arm cap replacement	9
Seat cushion replacement	9
Back cushion replacement	
Glider assembly	12

Warning/Caution/Note Definition

The words WARNING, CAUTION, and NOTE carry special meanings and should be carefully reviewed.

WARNING

Alerts the reader about a situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. It may also describe potential serious adverse reactions and safety hazards.

CAUTION

Alerts the reader of a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the product or other property. This includes special care necessary for the safe and effective use of the device and the care necessary to avoid damage to a device that may occur as a result of use or misuse.

Note - Provides special information to make maintenance easier or important instructions clearer.

Summary of safety precautions

CAUTION

- Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this
 manual.
- Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.
- Always use two people when you lift or move the product. Always confirm stable foot placement and back support to avoid the risk of injury or product damage.

EN 2 3507009001-A

Introduction

This manual assists you with the operation or maintenance of your Stryker product. Read this manual before operating or maintaining this product. Set methods and procedures to educate and train your staff on the safe operation or maintenance of this product.

CAUTION

- Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this
 manual.
- Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.

Note

- This manual is a permanent part of the product and should remain with the product even if the product is sold.
- Stryker continually seeks advancements in product design and quality. This manual contains the most current product
 information available at the time of printing. There may be minor discrepancies between your product and this manual. If
 you have any questions, contact Stryker Customer Service or Technical Support at 1-800-327-0770.

Product description

The Coast™ Glider is a furniture product that functions as a padded glider seat.

Intended use

The Coast Glider is intended to be used as furniture within the healthcare setting.

Expected service life

The **Coast** Glider has a 10 year expected service life under normal use conditions and with appropriate periodic maintenance.

Specifications

Safe working load	350 lb	159 kg	
Overall length	32.5 in.	826 mm	
Overall width	30 in.	762 mm	
Overall height	43.5 in.	1105 mm	
Seat depth (minimum)	19.5 in.	495 mm	
Seat width	21.5 in.	546 mm	
Seat height (minimum)	17.5 in.	445 mm	
Back width	22 in.	559 mm	
Back height (minimum)	28 in.	711 mm	
Arm height from seat	8.5 in.	216 mm	
Weight	100 lb	45.5 kg	

3507009001-A 3 EN

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

Contact information

Contact Stryker Customer Service or Technical Support at: 1-800-327-0770.

Stryker Medical 3800 E. Centre Avenue Portage, MI 49002 USA

To view your operations or maintenance manual online, see https://techweb.stryker.com/.

Have the serial number (A) of your Stryker product available when calling Stryker Customer Service or Technical Support. Include the serial number in all written communication.

Serial number location

The serial number for your product is located under the seat, toward the back of the glider (A).

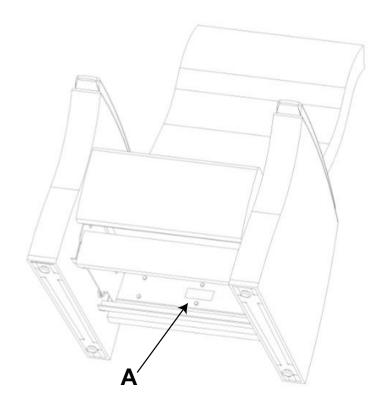


Figure 1 – Serial number location

EN 4 3507009001-A

Accessories and parts

These accessories may be available for use with your product. Confirm availability for your configuration or region. Call Stryker Customer Service: 1-800-327-0770.

Name	Part number
Arm cap, black	3500-008-700
Arm cap, kalua	3500-009-700
Arm cap, latte	3500-010-700
Arm cap. mocha	3500-011-700
Arm cap, shadow	3500-012-700
Arm cap, toast	3500-013-700
Bolt, back cushion	3500-039-500
Cushion, back	3500-018-700
Cushion, seat	3500-015-700
Foot, chair	3500-017-700
Screws, arm cap	3500-014-700
Screws, seat cushion	3500-100-077

3507009001-A 5 EN

Preventive maintenance

Remove product from service before you perform the preventive maintenance inspection. Check all items listed during annual preventive maintenance for all Stryker Medical products. You may need to perform preventive maintenance checks more often based on your level of product usage. Service only by qualified personnel.

Inspect the following items:
All fasteners are secure
Coast mechanism glides freely back and forth
Back, arms, and seat are not damaged
Product serial number:
Completed by:
Date:

EN 6 3507009001-A

Cleaning with SideKick® wipes

For the United States only. Call Stryker Customer Service: 1-800-327-0770 to confirm availability for your configuration or region.

Stryker's preferred wipes (2060-000-001 6" x 10" or 2060-000-002 9" x 12") include the following active ingredients:

- n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride 0.154%
- n-Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride 0.154%
- Isopropanol 21.000%

Non-active ingredient: Ethylene Glycol Monobutyl Ether – < 3%

Note - For safety information, read the product label.

Follow these steps to clean the external product surface using **SideKick** wipes. **SideKick** wipes are not approved to disinfect your product.

1. Rub with a fresh, clean **SideKick** wipe to remove all visible soils. Repeat as necessary until the product is clean.

Note - Use as many wipes as necessary.

2. Allow the external product surface to air dry before you return the product to service.

3507009001-A 7 EN

Cleaning the product

Recommended cleaners:

- Quaternary solutions (active ingredient ammonium chloride) that contain less than 3% glycol ether
- Chlorinated bleach solution (1 part bleach solution to 100 parts water, 520 ppm available chlorine solution)
- Isopropyl alcohol (active ingredient ≤ 21%)

Recommended cleaning method:

- 1. Follow the cleaning solution manufacturer's dilution recommendations.
- 2. Hand wash all surfaces of the product with a cleaning solution.
- 3. Avoid oversaturation. Do not allow the product to stay wet longer than the chemical manufacturer's guidelines for cleaning.
- 4. Dry the product.
- 5. Verify proper operation before you return the product to service.

EN 8 3507009001-A

Service

Arm cap replacement

Tools required:

- Rubber hammer
- · Large flat screwdriver

Procedure:

1. Using a rubber hammer, hit the back of the arm cap (A) toward the front of the glider until it stops moving forward (Figure 2).

Note - Use caution when you hit the arm cap to avoid the risk of damage to the fabric.

- 2. Position a large flat screwdriver between the arm cap and arm to pull up on the arm cap and loosen the arm cap from the glider. Remove and discard the arm cap.
- 3. Align the new arm cap bolts with the holes at the front of the arm slots.
- 4. Using a rubber hammer, hit the arm cap down until it is tight to the arm.
- 5. Using a rubber hammer, hit the arm cap toward the back of the glider until it stops moving back.

Note - Use caution when you hit the arm cap to avoid the risk of damage to the fabric.

6. Verify proper operation before you return the product to service.



Figure 2 - Arm cap

Seat cushion replacement

Tools required:

- · #3 Phillips screwdriver
- Blanket or equivalent

Procedure:

- 1. Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the glider.
- 2. Using two hands, lift up on the bottom of the glider to flip the glider onto its back.

CAUTION - Always use two people when you lift or move the product. Always confirm stable foot placement and back support to avoid the risk of injury or product damage.

3507009001-A 9 EN

- 3. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (A) that secure the seat cushion to the glider frame (Figure 3). Remove and discard the seat cushion. Save the screws.
- 4. Reverse steps to reinstall.
- 5. Verify proper operation before you return the product to service.

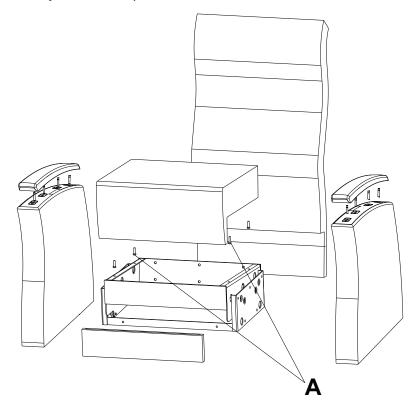


Figure 3 - Seat cushion replacement

Back cushion replacement

Tools required:

- 11mm combination wrench
- Blanket or equivalent

Procedure:

- 1. Lay a blanket, or equivalent, on the floor next to the glider.
- 2. Using two hands, lift up on the bottom of the glider to flip the glider onto its side and onto the blanket.

CAUTION - Always use two people when you lift or move the product. Always confirm stable foot placement and back support to avoid the risk of injury or product damage.

- 3. Using an 11mm combination wrench, remove the six bolts (A) that secure the back cushion to the glider frame (Figure 4). Remove and discard the back cushion. Save the bolts.
- 4. Reverse steps to reinstall.
- 5. Verify proper operation before you return the product to service.

EN 10 3507009001-A


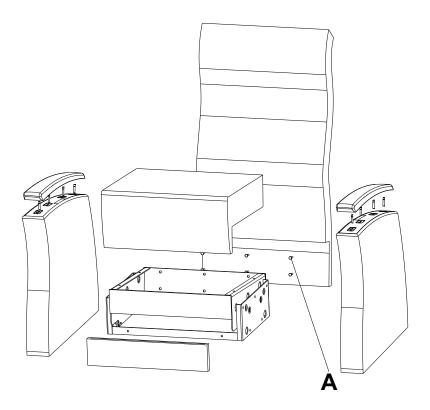


Figure 4 – Back cushion replacement

3507009001-A 11 EN

Glider assembly

3500-000-701 (Reference only)

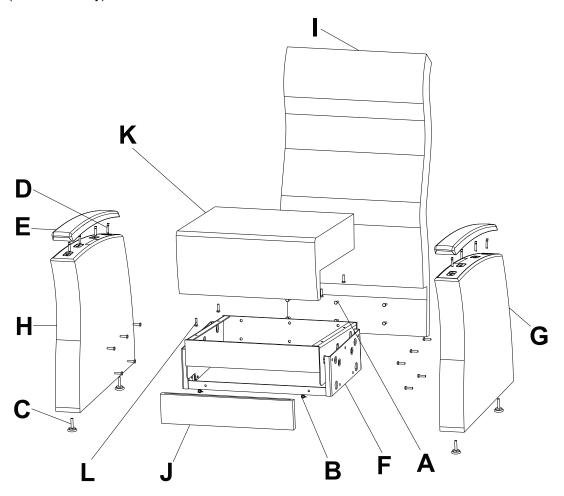

Item	Name	Quantity
Α	Hex head bolt	16
В	Truss Phillips/square serrated screw, black	2
С	Adjustable glide	4
D	Double threaded stud	8
E	Arm cap with wood insert	2
F	Glider mechanism	1
G	Arm, upholstered, left	1
Н	Arm, upholstered, right	1
I	Back, upholstered	1
J	Kick plate, upholstered	1
K	Seat, upholstered	1
L	Truss Phillips/square serrated screw, black	4

EN 12 3507009001-A



Fauteuil berçant Unity™ Coast™

Manuel d'utilisation et d'entretien





Symboles

Ţ <u>i</u>	Consulter la notice d'utilisation
\triangle	Mise en garde
REF	Numéro de référence
SN	Numéro de série
5	Distribué par
	Fabricant
US Patents	www.stryker.com/patents
<u>^</u>	Charge maximum admissible

3507009001-A FR

Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	2
Résumé des mesures de sécurité	
Introduction	
Description du produit	3
Utilisation	3
Durée de vie utile prévue	
Caractéristiques techniques	3
Informations de contact	4
Emplacement du numéro de série	
Accessoires et pièces	
Entretien préventif	6
Nettoyage avec des lingettes SideKick®	
Nettoyage du produit	8
Entretien	g
Remplacement du protège-accoudoir	
Remplacement du coussin d'assise	
Remplacement du coussin de dossier	10
Ensemble de fauteuil bercant	

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Résumé des mesures de sécurité

MISE EN GARDE

- Une utilisation incorrecte du produit est susceptible d'occasionner des blessures chez le patient ou l'opérateur. Utiliser le produit uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement imprévisible, susceptible d'occasionner des blessures chez le patient ou l'opérateur. La garantie du produit serait en outre annulée par toute modification du produit.
- Utiliser systématiquement deux intervenants pour soulever ou déplacer le produit. Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier pour éviter le risque de blessure ou d'endommagement du produit.

FR 2 3507009001-A

Introduction

Ce manuel vous aide à utiliser ou entretenir votre produit Stryker. Lire ce manuel avant d'utiliser ce produit ou d'en effectuer la maintenance. Il convient d'établir des procédures et techniques visant à éduquer et à former le personnel quant au fonctionnement et à l'entretien sécuritaires de ce produit.

MISE EN GARDE

- L'utilisation incorrecte du produit est susceptible de causer des blessures au patient ou à l'utilisateur. Utiliser le produit uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement imprévisible, susceptible de causer des blessures au patient ou à l'utilisateur. La garantie du produit serait en outre invalidée par toute modification du produit.

Remarque

- Ce manuel doit être considéré comme faisant partie du produit et doit l'accompagner à tout moment, même en cas de vente ultérieure du produit.
- Stryker cherche continuellement à améliorer le design et la qualité de ses produits. Ce manuel contient les informations produit les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Il peut y avoir de légères divergences entre le produit et ce manuel. Pour toute question, contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au +1-800-327-0770.

Description du produit

Le fauteuil berçant Coast™ est un produit mobilier rembourré berceur.

Utilisation

Le fauteuil berçant Coast est destiné à être utilisé en tant que meuble dans un environnement de soins de santé.

Durée de vie utile prévue

Le fauteuil berçant Coast a une durée de vie utile prévue de 10 ans dans des conditions d'utilisation normales assorties d'une maintenance périodique appropriée.

Caractéristiques techniques

	Charge maximum admissible	350 livres	159 kg	
Longueur totale		32,5 po	826 mm	
Largeur globale		30 po	762 mm	
Hauteur globale		43,5 po	1105 mm	
Profondeur du siège (minimum)		19,5 po	495 mm	
Largeur du siège		21,5 po	546 mm	
Hauteur du siège (minimum)		17,5 po	445 mm	
Largeur du dossier		22 po	559 mm	
Hauteur du dossier (minimum)		28 po	711 mm	

3507009001-A 3 FR

Hauteur de l'accoudoir à partir du siège	8,5 po	216 mm
Poids	100 livres	45,5 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Informations de contact

Contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Stryker Medical 3800 E. Centre Avenue Portage, MI 49002 États-Unis

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur https://techweb.stryker.com/.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série du produit se trouve sous le siège, vers le dossier du fauteuil berçant (A).

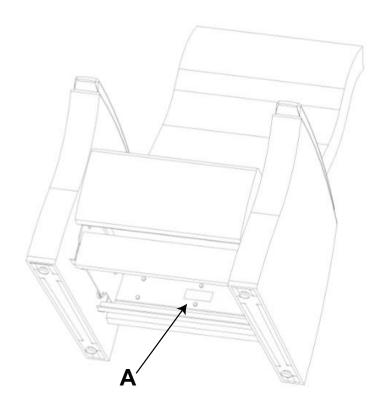


Figure 1 - Emplacement du numéro de série

FR 4 3507009001-A

Accessoires et pièces

Les accessoires suivants peuvent être disponibles pour le produit. Confirmer la disponibilité en fonction de la configuration du produit ou du pays. Contacter le service clientèle de Stryker : +1-800-327-0770.

Nom	Nº de pièce		
Protège-accoudoir, black	3500-008-700		
Protège-accoudoir, kalua	3500-009-700		
Protège-accoudoir, latte	3500-010-700		
Protège-accoudoir, mocha	3500-011-700		
Protège-accoudoir, shadow	3500-012-700		
Protège-accoudoir, toast	3500-013-700		
Boulon, coussin de dossier	3500-039-500		
Coussin, dossier	3500-018-700		
Coussin, assise	3500-015-700		
Pied, fauteuil	3500-017-700		
Vis, protège-accoudoir	3500-014-700		
Vis, coussin d'assise	3500-100-077		

3507009001-A 5 FR

Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d'effectuer les vérifications d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés pendant l'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications d'entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

Inspecter les éléments suivants :
Toutes les attaches sont correctement fixées
Le mécanisme du fauteuil berçant Coast glisse librement vers l'avant et l'arrière
Le dossier, les accoudoirs et le siège ne sont pas endommagés
Numéro de série du produit :
Effectué par :
Date :

FR 6 3507009001-A

Nettoyage avec des lingettes SideKick®

Destiné aux États-Unis uniquement. Appeler le service client Stryker au 1-800-327-0770 pour vérifier la disponibilité pour votre configuration ou région.

Les lingettes recommandées par Stryker (2060-000-001 6" x 10" (15,2 cm x 25,4 cm) ou 2060-000-002 9" x 12" (22,9 cm x 30,5 cm)) contiennent les principes actifs suivants :

- Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (60 % C14, 30 % C16, 5 % C12, 5 % C18) 0,154 %
- Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium (68 % C12, 32 % C14) 0,154 %
- Isopropanol 21,000 %

Principe non actif: Éther monobutylique de l'éthylène glycol – < 3 %

Remarque - Pour obtenir des renseignements relatifs à la sécurité, lire l'étiquette du produit.

Suivre ces étapes pour nettoyer la surface externe du produit à l'aide de lingettes **SideKick**. Les lingettes **SideKick** ne sont pas approuvées pour désinfecter le produit.

 Frotter avec une linegtte SideKick neuve et propre pour éliminer toutes les souillures visibles. Répéter au besoin jusqu'à ce que le produit soit propre.

Remarque - Utiliser autant de lingettes que nécessaire.

2. Laisser sécher la surface externe du produit avant de remettre le produit en service.

3507009001-A 7 FR

Nettoyage du produit

Nettoyants recommandés :

- Solutions quaternaires (principe actif : chlorure d'ammonium) contenant moins de 3 % d'éther de glycol
- Solution d'eau de Javel (1 volume d'eau de Javel pour 100 volumes d'eau, solution de chlore désinfectant à 520 ppm)
- Alcool isopropylique (principe actif ≤21 %)

Méthode de nettoyage recommandée :

- 1. Respecter les recommandations de dilution du fabricant de la solution de nettoyage.
- 2. Laver à la main toutes les surfaces du produit à l'aide d'une solution nettoyante.
- 3. Éviter une saturation excessive. S'assurer que le produit ne reste pas mouillé plus longtemps que la durée limite précisée dans les directives du fabricant du produit chimique relatives au nettoyage.
- 4. Sécher le produit.
- 5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

FR 8 3507009001-A

Entretien

Remplacement du protège-accoudoir

Outils requis:

- Maillet en caoutchouc
- · Grand tournevis plat

Procédure :

1. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper l'arrière du protège-accoudoir (A) vers l'avant du fauteuil berçant jusqu'à ce qu'il ne se déplace plus vers l'avant (Figure 2).

Remarque - Procéder avec précaution en frappant sur le protège-accoudoir pour éviter d'endommager le tissu.

- 2. Placer un grand tournevis plat entre le protège-accoudoir et l'accoudoir pour tirer le protège-accoudoir vers le haut et le desserrer du fauteuil berçant. Retirer et jeter le protège-accoudoir.
- 3. Aligner les boulons du nouveau protège-accoudoir avec les trous à l'avant des fentes de l'accoudoir.
- 4. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper le protège-accoudoir vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé sur l'accoudoir.
- 5. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper le protège-accoudoir vers le dossier du fauteuil berçant jusqu'à ce qu'il ne se déplace plus vers l'arrièrearrière.

Remarque - Procéder avec précaution en frappant sur le protège-accoudoir pour éviter d'endommager le tissu.

6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.



Figure 2 - Protège-accoudoir

Remplacement du coussin d'assise

Outils requis:

- Tournevis cruciforme n° 3
- Drap ou équivalent

Procédure:

- 1. Placer un drap ou équivalent sur le sol derrière le fauteuil berçant.
- 2. Soulever le bas du fauteuil berçant des deux mains pour le poser sur son dossier.

3507009001-A 9 FR

MISE EN GARDE - Utiliser systématiquement deux intervenants pour soulever ou déplacer le produit. Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier pour éviter le risque de blessure ou d'endommagement du produit.

- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (A) qui fixent le coussin d'assise au châssis du fauteuil berçant (Figure 3). Retirer et jeter le coussin d'assise. Conserver les vis.
- 4. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

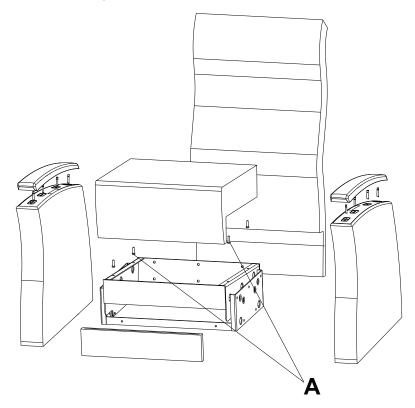


Figure 3 – Remplacement du coussin d'assise

Remplacement du coussin de dossier

Outils requis:

- Clé mixte de 11 mm
- · Drap ou équivalent

Procédure:

- 1. Placer un drap ou équivalent sur le sol à côté du fauteuil berçant.
- 2. Soulever le bas du fauteuil berçant des deux mains pour le poser sur son côté, sur le drap.

MISE EN GARDE - Utiliser systématiquement deux intervenants pour soulever ou déplacer le produit. Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier pour éviter le risque de blessure ou d'endommagement du produit.

- 3. À l'aide d'une clé mixte de 11 mm, retirer les six boulons (A) qui fixent le coussin de dossier au châssis du fauteuil berçant (Figure 4). Retirer et jeter le coussin de dossier. Conserver les boulons.
- 4. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

FR 10 3507009001-A


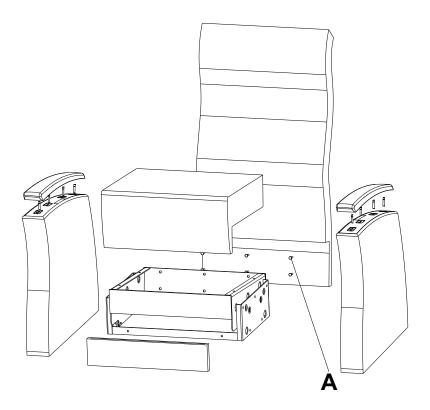


Figure 4 – Remplacement du coussin de dossier

3507009001-A 11 FR

Ensemble de fauteuil berçant

3500-000-701 (référence uniquement)

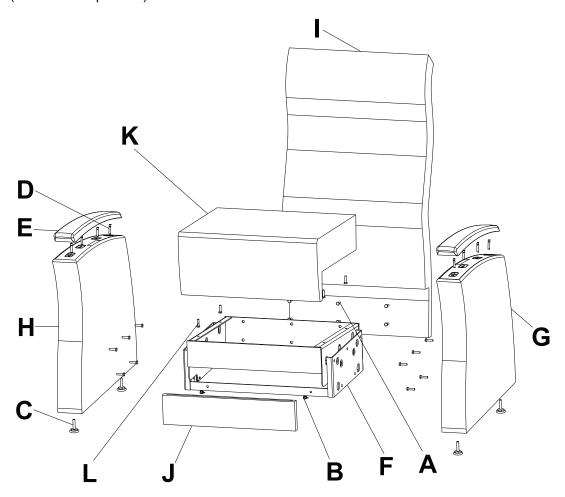

Élément	Nom	Quantité
Α	Boulon à tête hexagonale	16
В	Vis dentelée à tête cruciforme bombée/carrée, noire	2
С	Glissière réglable	4
D	Goujon à double filetage	8
E	Protège-accoudoir avec insert en bois	2
F	Mécanisme berçant	1
G	Accoudoir, tapissé, gauche	1
Н	Accoudoir, tapissé, droit	1
1	Dossier, tapissé	1
J	Garde-pieds, tapissé	1
K	Siège, tapissé	1
L	Vis dentelée à tête cruciforme bombée/carrée, noire	4

FR 12 3507009001-A

stryker



Stryker Medical 3800 E. Centre Avenue Portage, MI 49002 USA



Global Furniture Group 560 Supertest Rd. Downsview, ON M3J 2M6 Canada