

Putplasčio čiužinys / „Bolster“ (su velenėliu pagalvei atremti) čiužinys

Naudojimo instrukcija















REF 7002











CE

LT

Simboliai

	Žr. naudojimo instrukciją / brošiūrą
	Naudojimo instrukcija / Žr. naudojimo instrukciją
	Bendro pobūdžio įspėjimas
	Perspėjimas
	Katalogo numeris
	Serijos numeris
	Gamintojas
	Pagaminimo data
	CE ženklas
	JK atitikties vertinimo ženklas
	Importuotojas
	Unikalasis priemonės identifikatorius
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje
	Europos medicinos priemonė
	Saugioji darbinė apkrova

	B tipo liečiamoji dalis
	Plauti rankomis
	Nedžiovinti džioviklyje
	Nenaudoti sausojo valymo
	Nelyginti
	Leiskite visiškai išdžiūti
	Chlorintas baliklis
	<p>Atitinka vidutinio pavojingumo standartą BS 7177:2008</p> <p>Pastaba - Ant gaminio esanti BS 7177 etiketė yra mėlyna.</p> <p>REF 7002-5-712</p> <p>REF 7002-2-714</p>

Turinys

Sąvokų „Įspėjimas“, „Dėmesio“ ir „Pastaba“ apibrėžtys	2
Atsargumo priemonių santrauka	2
Įvadas	4
Gaminio aprašas	4
Paskirtis	4
Klinikinė nauda	4
Numatoma naudojimo trukmė	5
Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas	5
Kontraindikacijos	5
Specifikacijos	5
Kontaktinė informacija	6
Serijos numerio vieta	7
Naudojimas	8
Paruošimas naudoti	8
Šlapimo nelaikymo ir drenavimo valdymas	8
Valymas	9
Dezinfekavimas	10
Prevencinė priežiūra	11

Sąvokų „Įspėjimas“, „Dėmesio“ ir „Pastaba“ apibrėžtys

Žodžiai ĮSPĖJIMAS, DĖMESIO ir PASTABA perteikia specialias reikšmes, todėl reikia įsigilinti į jų prasmę.

ĮSPĖJIMAS

Perspėja skaitytoją apie situaciją, kurios neišvengus pasekmės gali būti mirtinos arba lemti sunkų sužalojimą. Įspėjimas taip pat gali nurodyti galimas sunkias nepageidaujamas reakcijas ir pavojų saugai.

DĖMESIO

Perspėja skaitytoją apie galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti nesunkaus arba vidutinio sunkumo sužalojimo pavojus naudotojui arba pacientui, gali būti pakenkta įrenginiui arba padaryta kitokios turtinės žalos. Tai apima specialias atsargumo priemones, būtinas prietaisui saugiai ir veiksmingai naudoti, bei priemones, kurių reikia imtis, kad prietaisas nebūtų pažeistas jį naudojant arba netinkamai naudojant.

Pastaba - Suteikia specialią informaciją, kad techninė priežiūra vyktų sklandžiau, o svarbios instrukcijos taptų aiškesnės.

Atsargumo priemonių santrauka

Būtinai perskaitykite šiame puslapyje pateikiamus įspėjimus bei atsargumo priemones ir griežtai jų laikykitės. Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

ĮSPĖJIMAS

- Su čiuziniu visada naudokite paklodę.
- Nekiškite adatų į čiuzinio užvalkalą. Skylės gali leisti kūno skysčiams patekti į čiuzinio vidų (vidinę šerdį) ir tai gali sukelti kryžminį užteršimą arba pakenkti gaminiui.
- Visada naudokite čiuzinį su suderinamais lovų rėmais, kaip nurodyta šios instrukcijos specifikacijų skyriuje.
- Visada reguliariai stebėkite paciento būklę, kad būtų užtikrintas pacientų sauga.
- Neplaukite vidinių šio čiuzinio komponentų. Čiuzinį išmeskite, jeigu jo vidus yra užterštas.
- Nemerkite čiuzinio į valymo arba dezinfekavimo tirpalus.
- Neleiskite skysčiui kauptis ant čiuzinio.
- Čiuzinio užvalkalo negalima lyginti, valyti ir džiovinti.
- Visada dezinfekuokite čiuzinį pagal savo ligoninės protokolus, kad išvengtumėte kryžminio užkrėtimo ir infekcijos rizikos.
- Neleiskite skysčiams kauptis ant čiuzinio.
- Gaminiai valyti nenaudokite „Virex® Tb“.
- Nenaudokite pagreitintų vandenilio peroksidų arba ketvirtinių druskų, kuriuose yra glikolio eterių, nes jie gali sugadinti čiuzinio užvalkalą.
- Kiekvieną kartą valydami čiuzinio užvalkalą, patikrinkite čiuzinį. Laikykitės savo ligoninės protokolų ir atlikite visą profilaktinę priežiūrą kiekvieną kartą valydami čiuzinio užvalkalą. Jeigu kyla pavojus, nedelsdami nustokite čiuzinį naudoti ir pakeiskite gaminį, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.

PERSPĖJIMAS

- Gaminį naudojant netinkamai galima sužaloti pacientą arba operatorių. Naudokite įrenginį tik šioje instrukcijoje nurodytomis sąlygomis.
- Nei gaminio, nei jokių gaminio komponentų negalima modifikuoti. Modifikavus gaminį, jo veikimas gali tapti nenuspėjamas, o tai gali sužaloti pacientą arba operatorių. Be to, gaminį modifikavus netenka galios jam suteikta garantija.
- Visada pabaigę valyti arba dezinfekuoti nuvalykite gaminį švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kai kurios valymo ir dezinfekavimo priemonės yra korozinės ir gali sugadinti gaminį. Gaminio nenuplovus ir nenusausinus, ant jo paviršiaus lieka šerdinančių preparato likučių, kurie gali sukelti per ankstyvą kritiškai svarbių komponentų irimą. Nesilaikant šių valymo arba dezinfekavimo nurodymų, garantija gali nebegalioti.
- Valymo ir dezinfekavimo priemonės su agresyviomis cheminėmis medžiagomis sutrumpina numatytą čiuzinio užvalkalo tinkamumo naudoti trukmę.

- Kai valote čiužinio apatinę dalį, neleiskite skysčiui prasiskverbti į užtrauktuko sritį arba apsaugos nuo vandens užvalkalą barjerą. Ant užtrauktuko nutekėję skysčiai gali prasiskverbti į čiužinį.
 - Prieš padėdami laikyti, klojami paklodę arba guldydami pacientą, visuomet leiskite čiužinio užvalkalui išdžiūti. Sausas gaminytis padeda išvengti suprastėjusio gaminio veiksmingumo.
 - Čiužinio užvalkalą reikia saugoti nuo per stipraus didelės koncentracijos dezinfekuojančių tirpalų poveikio, nes jie gali sugadinti čiužinio užvalkalą.
 - Gamintojo valymo nurodymų ir „Stryker“ naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali sumažinti čiužinio tinkamumo naudoti trukmę.
-

Įvadas

Šioje instrukcijoje pateikta informacija, kurios prireiks eksploatuojant ir techniškai prižiūrint „Stryker“ gaminį. Perskaitykite instrukciją prieš pradėdami šio įrenginio eksploataciją ir techninės priežiūros darbus. Parenkite metodiką ir numatykite priemones, kurios padėtų darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų šiam įrenginiui saugiai eksploatuoti ir prižiūrėti.

PERSPĖJIMAS

- Gaminį naudojant netinkamai galima sužaloti pacientą arba operatorių. Naudokite įrenginį tik šioje instrukcijoje nurodytomis sąlygomis.
 - Nei gaminio, nei jokių gaminio komponentų negalima modifikuoti. Modifikavus gaminį, jo veikimas gali tapti nenuspėjamas, o tai gali sužaloti pacientą arba operatorių. Be to, gaminį modifikavus netenka galios jam suteikta garantija.
-

Pastaba

- Ši instrukcija yra neatskiriama įrenginio dalis ir turi likti su įrenginiu netgi jį pardavus.
- „Stryker“ nuolat ieško būdų pagerinti gaminių konstrukciją ir kokybę. Šioje instrukcijoje pateikiama pati naujausia spausdinimo metu žinoma informacija apie įrenginį. Gali pasitaikyti nedidelių gaminio ir šios instrukcijos neatitikimų. Visais rūpimais klausimais kreipkitės į „Stryker“ klientų tarnybą.

Gaminio aprašas

„Stryker“ modeliai 7002-2-012, 7002-2-014, 7002-5-012, 7002-2-512, 7002-2-514, 7002-5-512, 7002-5-014, 7002-5-712, 7002-5-514 ir 7002-2-714 yra neelektriniai poroloniniai čiužiniai. „Stryker“ modeliai 7002-4-018, 7002-4-020, 7002-4-518 ir 7002-4-520 yra neelektriniai lovos pailginimo čiužiniai su velenėliu pagalvei atremti. Čiužiniai skirti naudoti su suderinamais lovos rėmais, aprašytais šios instrukcijos specifikacijų skyriuje.

Paskirtis

7002 čiužiniai skirti naudoti kaip poilsio ar miego paviršius suaugusiems žmonėms ligoninėje. SV serijos čiužiniai yra skirti padėti užtikrinti opų (I, II, III, IV stadijų, nestabiliųjų ir giliųjų audinių opų ar visų spaudimo sukeltų opų) prevenciją ir gydymą bei yra rekomenduojami naudoti kartu su sveikatos priežiūros specialisto atliktu klinikiniu rizikos veiksnių įvertinimu bei odos vertinimus.

Šie čiužiniai visada turi būti naudojami su čiužinio užvalkalu. Čiužinio užvalkalas gali sąveikauti su visa išorine oda.

Šių čiužinių operatoriai yra sveikatos priežiūros specialistai (pavyzdžiui, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ar gydytojai).

„Stryker“ skatina klinikinį kiekvieno paciento vertinimą ir tinkamą operatoriaus naudojimą.

7002 čiužiniai nėra skirti:

- naudoti namie sveikatos priežiūros aplinkoje
- naudoti kaip sterilus gaminy
- naudoti esant degių anestetikų

Klinikinė nauda

Padeda užtikrinti visų spaudimo sukeltų opų ir sužalojimų prevenciją ir gydymą.

Numatoma naudojimo trukmė

Tinkamai naudojant, esant tinkamoms sąlygoms ir atliekant tinkamą periodinę priežiūrą, kiekvieno 7002 čiužinio numatoma tinkamumo naudoti trukmė yra vieneri metai.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas


Visada laikykitės galiojančių vietinių rekomendacijų ir (arba) reglamentų, nustatančių reikalavimus dėl aplinkos apsaugos bei rizikos, susijusios su įrangos atliekų perdirbimu ar šalinimu pasibaigus jos gyvavimo laikui.

Kontraindikacijos

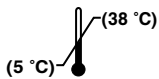
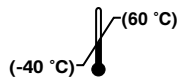




Nežinoma.

Specifikacijos

Taikomus degumo standartus žr. čiužinio etiketėje.

 Saugioji darbinė apkrova	215 kg				
Pastaba - Neviršykite didžiausio paciento svorio, leidžiamo lovos rėmui. Žr. lovos rėmo naudojimo instrukciją.					
Modelis su liepsnų barjeru	7002-2-714 597-1, 597-2, BS 6807:2006, BS 7177:2008				
Ilgis	2 000 mm				
Plotis	860 mm				
Storis	140 mm				
Svoris	8,8 kg				
Modelis su liepsnų barjeru	7002-5-712 597-1, 597-2, BS 6807:2006, UNI 9175, BS 7177:2008				
Ilgis	2 000 mm				
Plotis	860 mm				
Storis	120 mm				
Svoris	9,2 kg				
Modelis su liepsnų barjeru	7002-2-512	7002-2-514	7002-5-512	7002-4-518	7002-4-520
BS EN597-1, BS EN597-2					
Ilgis	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	330 mm	330 mm
Plotis	860 mm	860 mm	860 mm	710 mm	710 mm
Storis	120 mm	140 mm	120 mm	180 mm	200 mm
Svoris	7,7 kg	8,8 kg	9,2 kg	1,6 kg	1,8 kg

Modelis	7002-2-012	7002-2-014	7002-5-012	7002-4-018	7002-4-020
Ilgis	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	330 mm	330 mm
Plotis	860 mm	860 mm	860 mm	710 mm	710 mm
Storis	120 mm	140 mm	120 mm	180 mm	200 mm
Svoris	7,1 kg	8,2 kg	8,6 kg	1,4 kg	1,6 kg
Modelis	7002-5-014 BS EN 597-1, BS EN 597-2				
Ilgis	2 000 mm				
Plotis	860 mm				
Storis	140 mm				
Svoris	10,5 kg				
Modelis su liepsnų barjeru	7002-5-514 BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 6807:2006, UNI 9175				
Ilgis	2 000 mm				
Plotis	860 mm				
Storis	140 mm				
Svoris	11,1 kg				
Čiužinio medžiaga					
Porolonas	Poliuretanas				
Užvalkalas	Poliuretanu dengtas poliesteris				
Suderinami lovų rėmai	SV1, SV2. Apie lovų rėmų prieinamumą teiraukitės savo „Stryker“ atstovo.			SV1, SV2 su pasirinktiniu lovos ilgintuvu	

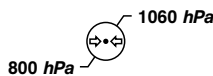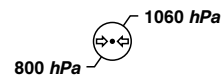Aplinkos sąlygos	Naudojimas	Laikymas ir transportavimas
Aplinkos temperatūra		
Santykinė oro drėgmė (nesikondensuojanti)		
Atmosferos slėgis		

„Stryker“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.

Kontaktinė informacija

Susisieki su „Stryker“ klientų aptarnavimo arba techninio palaikymo skyriumi: +1 800-327-0770.

„Stryker“ medicininė informacija

Kayseri Serbest Bölge Şubesi

2. Cad. No:17 38070

Kayseri, Turkey

El. paštas: infosmi@stryker.com

Telefonas: + 90 (352) 321 43 00 (pbx)

Faksas: + 90 (352) 321 43 03

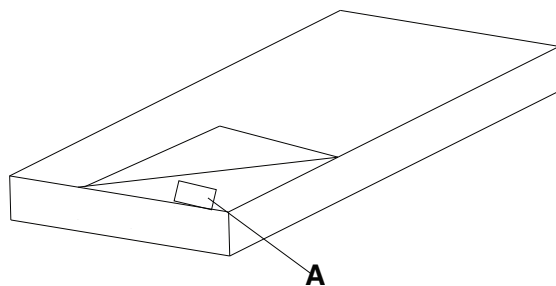
Internetinė svetainė: www.stryker.com

Pastaba - Naudotojas ir (arba) pacientas turėtų pranešti apie visus rimtus su produktu susijusius incidentus tiek gamintojui, tiek Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra įsisteigtas naudotojas ir (arba) gyvena pacientas, kompetentingai institucijai.

Norėdami internete peržiūrėti savo operacijų ar priežiūros vadovą internetu, žr. <https://techweb.stryker.com/>.

Skambindami „Stryker“ klientų aptarnavimo skyriui, turėkite pasiekiamą savo „Stryker“ produkto serijos numerį (A). Nurodykite serijos numerį visuose rašytiniuose pranešimuose.

Serijos numerio vieta



Serijos numerį galite rasti čiužinio užvalkalo viduje. Norėdami perskaityti produkto etiketę, atitraukite čiužinio užvalkalą.

Naudojimas

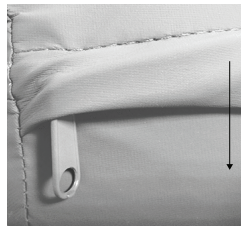
Paruošimas naudoti

ĮSPĖJIMAS

- Su čiužiniu visada naudokite paklodę.
 - Nekiškite adatų į čiužinio užvalkalą. Skylės gali leisti kūno skysčiams patekti į čiužinio vidų (vidinę šerdį) ir tai gali sukelti kryžminį užteršimą arba pakenkti gaminiui.
 - Visada naudokite čiužinį su suderinamais lovų rėmais, kaip nurodyta šios instrukcijos specifikacijų skyriuje.
-


Čiužinio paruošimas naudoti (7002-2-012, 7002-2-014, 7002-5-012, 7002-2-512, 7002-2-514, 7002-5-512, 7002-5-712, 7002-5-014, 7002-5-514, 7002-2-714):

1. Padėkite čiužinį ant suderinamo lovos rėmo.
2. Užtikrinkite, kad čiužinys būtų išlygiuotas su apsaugos nuo vandens užvalkalo barjeru, nukreiptu žemyn (žr. pav. 1).



pav. 1 – Apsaugos nuo vandens užvalkalo barjeras

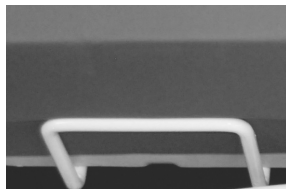3. Vizualiai patikrinkite, ar čiužinys yra tarp čiužinio laikiklių kiekvienoje lovos rėmo pusėje (pav. 2).



pav. 2 – Čiužinio laikiklis

4. Patraukite apsaugos nuo vandens užvalkalo barjerą virš užtrauktuko.
5. Prieš naudodami pacientui, užklokite ant čiužinio paklodę vadovaudamiesi savo ligoninės protokoliais.

Kaip paruošti naudoti lovos ilgintuvo čiužinį su velenėliu pagalvei atremti (7002-4-018, 7002-4-020, 7002-4-518, 7002-4-520), žr. **SV1**, **SV2** naudojimo instrukciją.

Šlapimo nelaikymo ir drenavimo valdymas

ĮSPĖJIMAS - Visada reguliariai stebėkite paciento būklę, kad būtų užtikrintas paciento saugumas.

Norėdami valdyti šlapimo nelaikymą, galite naudoti vienkartinės sauskelnės ar šlapimo nelaikymo pagalvėles. Visada užtikrinkite tinkamą odos priežiūrą po kiekvieno šlapimo nelaikymo epizodo.

Valymas

Valymas ir dezinfekavimas yra du atskiri procesai. Prieš dezinfekuodami, nuvalykite ir įsitikinkite, kad valymo priemonė yra efektyvi.

ĮSPĖJIMAS

- Neplaukite vidinių šio čiužinio komponentų. Čiužinį išmeskite, jeigu jo vidus yra užterštas.
 - Nemerkite čiužinio į valymo arba dezinfekavimo tirpalus.
 - Neleiskite skysčiui kauptis ant čiužinio.
 - Čiužinio užvalkalą negalima lyginti, valyti ir džiovinti.
-

PERSPĖJIMAS

- Visada pabaigę valyti arba dezinfekuoti nuvalykite gaminį švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kai kurios valymo ir dezinfekavimo priemonės yra korozinės ir gali sugadinti gaminį. Gaminio nenuplovus ir nenusausinus, ant jo paviršiaus lieka šerdinančių preparato likučių, kurie gali sukelti per ankstyvą kritiškai svarbių komponentų irimą. Nesilaikant šių valymo arba dezinfekavimo nurodymų, garantija gali nebegalioti.
 - Valymo ir dezinfekavimo priemonės su agresyviomis cheminėmis medžiagomis sutrumpina numatytą čiužinio užvalkalą tinkamumo naudoti trukmę.
 - Kai valote čiužinio apatinę dalį, neleiskite skysčiui prasiskverbti į užtrauktuko sritį arba apsaugos nuo vandens užvalkalą barjerą. Ant užtrauktuko nutekėję skysčiai gali prasiskverbti į čiužinį.
 - Prieš padėdami laikyti, klojami paklodę arba guldydami pacientą, visuomet leiskite čiužinio užvalkalui išdžiūti. Sausas gaminys padeda išvengti suprastėjusio gaminio veiksmingumo.
-

Visada laikykitės ligoninės valymo ir dezinfekavimo protokolų.

Čiužinio užvalkalą valymas:

1. Švaria, minkšta, drėgna šluoste nuvalykite čiužinio užvalkalą naudodami švelnaus poveikio muilo ir vandens tirpalą pašalinėms medžiagoms pašalinti.
2. Čiužinio užvalkalą nuvalykite švaria, sausa šluoste, kad pašalintumėte skysčio arba valymo priemonės perteklių.
3. Prieš vėl naudodami, leiskite čiužinio užvalkalui išdžiūti.

Dezinfekavimas

ĮSPĖJIMAS

- Visada dezinfekuokite čiužinį pagal savo ligoninės protokolus, kad išvengtumėte kryžminio užkrėtimo ir infekcijos rizikos.
 - Nemerkite čiužinio į valymo arba dezinfekavimo tirpalus.
 - Neleiskite skysčiams kauptis ant čiužinio.
 - Gaminiai valyti nenaudokite „Virex® Tb“.
 - Nenaudokite pagreitintų vandenilio peroksidų arba ketvirtinių druskų, kuriuose yra glikolio eterių, nes jie gali sugadinti čiužinio užvalkalą.
-

PERSPĖJIMAS

- Visada pabaigę valyti arba dezinfekuoti nuvalykite gaminį švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kai kurios valymo ir dezinfekavimo priemonės yra korozinės ir gali sugadinti gaminį. Gaminio nenuplovus ir nenusausinus, ant jo paviršiaus lieka išdžiovantys preparato likučiai, kurie gali sukelti per ankstyvą kritiškai svarbių komponentų irimą. Nesilaikant šių valymo arba dezinfekavimo nurodymų, garantija gali nebegaloti.
 - Prieš padėdami laikyti, klojami paklodę arba guldydami pacientą, visuomet leiskite čiužinio užvalkalui išdžiūti. Sausas gaminys padeda išvengti suprastėjusio gaminio veiksmingumo.
 - Čiužinio užvalkalą reikia saugoti nuo per stipraus didelės koncentracijos dezinfekuojančių tirpalų poveikio, nes jie gali sugadinti čiužinio užvalkalą.
 - Kai valote čiužinio apatinę dalį, neleiskite skysčiui prasiskverbti į užtrauktuko sritį arba apsaugos nuo vandens užvalkalo barjerą. Ant užtrauktuko nutekėję skysčiai gali prasiskverbti į čiužinį.
 - Valymo ir dezinfekavimo priemonės su agresyviomis cheminėmis medžiagomis sutrumpina numatytą čiužinio užvalkalo tinkamumo naudoti trukmę.
 - Gamintojo valymo nurodymų ir „Stryker“ naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali sumažinti čiužinio tinkamumo naudoti trukmę.
-

Siūlomoms dezinfekavimo priemonėms:

- Ketvirtinės druskos be glikolio eterių
- Fenolio valikliai (veiklioji medžiaga – o-fenilfenolis)
- Chlorinto baliklio tirpalo (5,25 %, santykiu mažiau kaip 1 dalis baliklio ir 100 dalių vandens)
- 70 % izopropilo alkoholis

Visada laikykitės ligoninės valymo ir dezinfekavimo protokolų.

Čiužinio užvalkalo dezinfekavimas:

1. Prieš naudodami dezinfekavimo priemones, nuvalykite ir nusauskite čiužinio užvalkalą.
2. Rekomenduojamą dezinfekavimo tirpalą naudokite su iš anksto mirkytomis servetėlėmis arba drėgna šluoste. Nemirkykite čiužinio.

Pastaba - Laikykitės dezinfekavimo priemonės nurodymų dėl tinkamo kontakto laiko ir skalavimo reikalavimų.

3. Čiužinio užvalkalą valykite švaria, sausa šluoste, kad pašalintumėte skysčio arba dezinfekavimo priemonės perteklių.
4. Prieš vėl naudodami, leiskite čiužinio užvalkalui išdžiūti.

Prevencinė priežiūra

Prieš atlikdami profilaktinę priežiūrą, nustokite gaminį naudoti.

ĮSPĖJIMAS - Kiekvieną kartą valydami čiužinio užvalkalą, patikrinkite čiužinį. Laikykitės savo ligoninės protokolų ir atlikite visą profilaktinę priežiūrą kiekvieną kartą valydami čiužinio užvalkalą. Jei kyla pavojus, nedelsdami nustokite čiužinį naudoti ir pakeiskite gaminį, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.

Pastaba - Prieš patikrinimą nuvalykite ir dezinfekuokite čiužinio išorę, jei taikoma.

Patikrinkite šiuos elementus:

_____ Užtrauktukas ir danga (viršuje ir apačioje) yra be įtrūkimų, įpjovimų, skylių ar kitų angų

_____ Visiškai atitraukę čiužinio užvalkalą, patikrinkite, ar vidiniai komponentai yra be dėmių, atsiradusių dėl skysčių patekimo ar užteršimo.

_____ Porolono ir kitų komponentų kokybė nesuprastėjo arba jie neatsiskyrė.

Gaminio serijos numeris:
Užpildė:
Data:



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA



Stryker EMEA Supply Chain Services B. V.
Frans Maasweg 2
Venlo 5928 SB, The Netherlands