

Emergency Relief Bed™

stryker

Cama hospitalar manual

Manual de utilização

REF 7600-000-900



Símbolos

	Instruções de funcionamento/Consultar as instruções de utilização
	Advertência geral
	Afaste as mãos
	Não empurrar
REF	Número de catálogo
	Fabricante
	Marcação CE
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Carga de trabalho segura
	Peso do equipamento com carga de trabalho segura
	Peso máximo do doente

	Manter seco
	Não usar objetos cortantes para abrir a embalagem

Resumo das precauções de segurança

ADVERTÊNCIA

A segurança pessoal do doente ou do utilizador pode estar envolvida. O desrespeito por esta informação pode resultar em lesão do doente ou do utilizador.

PRECAUÇÃO

Estas instruções destacam procedimentos especiais ou precauções que têm de ser seguidas para evitar danos no equipamento.

ADVERTÊNCIA

- Não se sente diretamente nas extremidades da cama. O peso excessivo irá fazer com que a estrutura da cama se eleve, provocando possivelmente lesões no doente.
- Ative sempre os travões dos rodízios quando um doente sobre para a cama ou desce desta. Empurre a cama para se certificar de que os travões estão ativados de forma segura. Ative sempre os travões a não ser que a cama esteja a ser movida. Podem ocorrer lesões se a cama se mover enquanto um doente estiver a subir para a cama ou a descer desta.
- O limite máximo do peso do doente do dispositivo é de 160 kg. A carga de trabalho segura é de 180 kg. Um peso acima deste limite pode provocar a ruptura do dispositivo ou o colapso resultando em lesões no doente.
- Empurre a cama com barra de pés quando o doente é propenso a evitar lesões ao utilizador final. Pode também empurrar a cama a partir da extremidade do lado da cabeça quando a cabeceira de Fowler (extremidade do lado da cabeça do superfície de apoio do doente) está elevada.
- Tenha precaução ao mover a cama quando esta estiver ocupada já que não existem meios de contenção ou grades laterais.
- Não utilize a haste do suporte de soros para puxar/empurrar o produto. Poderão ocorrer danos no produto.

Descrição do produto

A **Emergency Relief Bed** é uma cama hospitalar não elétrica, ajustável manualmente que é utilizada em combinação com uma superfície de apoio do doente e

CE

7600-009-005 Rev A.0


1 PT

inclui uma haste do suporte de soros. A superfície de apoio do doente não elétrica adequa-se às dimensões da estrutura. A cama básica e a superfície foram desenvolvidas como resposta à falta de camas hospitalares durante a pandemia de COVID-19.

Indicações de utilização

A **Emergency Relief Bed** destina-se a assistir com o posicionamento, terapia, recuperação, apoio, e transporte de doentes num hospital geral ou num ambiente temporário de emergência durante uma situação local, estadual ou federal declarada. O produto destina-se a ser utilizado apenas pela duração da pandemia COVID-19. A superfície de apoio não elétrica destina-se a fornecer uma superfície de apoio para tratamento e exame de um doente.

Ilustração do produto

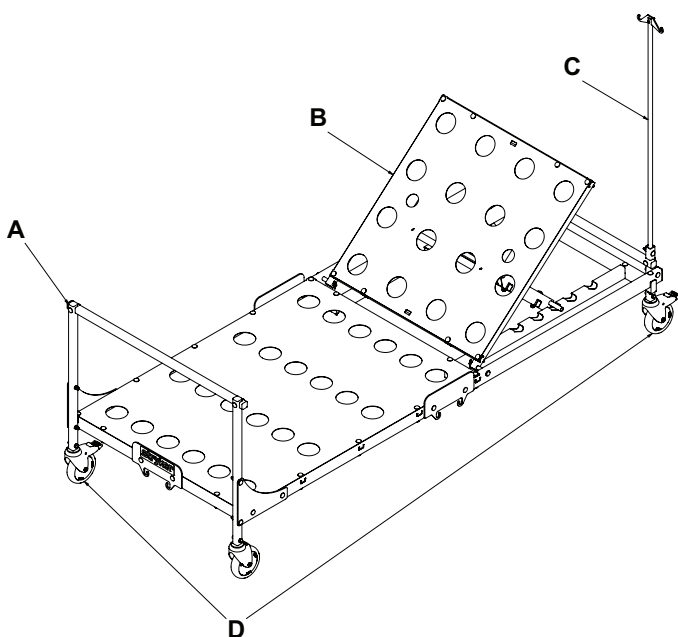

- A Barra de pés
- B Cabeceira de Fowler
- C Haste do suporte de soros
- D Rodízio travão

Inserir a haste do suporte de soros

1. Remover o contrapino rue ring e o pino de união no encaixe da haste do suporte de soros.
2. Insira a haste do suporte de soros (C) no encaixe da haste do suporte de soros.

3. Reinstale o contrapino rue ring e o pino de união para fixar o suporte de soros no encaixe da haste do suporte de soros.

Limpeza

Método de limpeza recomendado:

1. Lave todas as superfícies expostas do produto à mão com um detergente suave utilizando spray ou toalhetes previamente humedecidos.
2. Siga as instruções do fabricante da solução de limpeza relativas ao tempo de contacto adequado e aos requisitos de enxaguamento.
3. Permita que o produto seque antes de o devolver para utilização.

Nota - Evite a saturação excessiva. Não deixe o produto ficar molhado.

Desinfecção

Os desinfetantes recomendados para as superfícies deste produto incluem os seguintes:

- Produtos de limpeza quaternários (ingrediente ativo - cloreto de amónio) que contenham < 3% de éter de glicol
- Fenólicos (princípio ativo — o-fenilfenol)
- Solução à base de cloro (lixívia) (5,25% – diluição de menos de 1 parte de lixívia para 100 partes de água)
- Álcool (princípio ativo — álcool isopropílico a 70%)

Método de desinfecção recomendado:

1. Cumpra as recomendações de diluição do fabricante da solução desinfetante.
2. Aplique a solução desinfetante recomendada, em spray ou com toalhetes pré-impregnados.
3. Lave à mão todas as superfícies expostas do produto com o desinfetante recomendado.
4. Permita que o produto seque antes de o devolver para utilização.

Nota

- Evite a saturação excessiva. Não deixe o produto ficar molhado.
- Siga as recomendações de diluição do fabricante relativas ao tempo de contacto adequado e aos requisitos de enxaguamento. Siga as diretrizes do fabricante do produto químico para uma desinfecção adequada.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA

EC REP

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork, T45 HX08
Ireland