

# Emergency Relief Bed™

# stryker

Manuel hastane yatağı

Kullanma Kılavuzu

REF 7600-000-900



## Semboller

	Çalıştırma talimatı/Kullanma talimatına başvurun
	Genel uyarı
	Ellerinizi uzak tutun
	İtmeyin
	Katalog numarası
	Üretici
	CE işareti
	Avrupa Topluluğu yetkili temsilcisi
	Güvenli çalışma yükü
	Güvenli çalışma yüküyle birlikte ekipman kütlesi
	Azami hasta ağırlığı

	Kuru tutun
	Ambalajı keskin nesnelere açmayın

## Güvenlik önlemlerinin özeti

### UYARI

Hastanın veya kullanıcının kişisel güvenliği söz konusu olabilir. Bu bilgilerin göz ardı edilmesi, hastanın veya kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

### DİKKAT

Bu talimat, ekipman hasarından kaçınmak için izlenmesi gereken özel prosedürlere veya önlemlere işaret etmektedir.

### UYARI

- Doğrudan yatağın uçlarına oturmayın. Aşırı ağırlık, şilte destek yüzeyinin devrilmesine ve hastanın yaralanmasına neden olabilir.
- Hasta yatağa çıkarken veya yataktan inerken mutlaka tekerlek frenlerini uygulayın. Frenlerin sıkıca kilitlendiğinden emin olmak için yatağı itin. Yatak hareket etmediğinde her zaman frenleri etkinleştirin. Hasta yatağa çıkarken veya yataktan inerken yatağın hareket etmesi durumunda yaralanmalar oluşabilir.
- Cihazın azami hasta ağırlığı sınırı 160 kg'dir. Güvenli çalışma yükü 180 kg'dir. Bu sınırı aşan ağırlıklar, cihazın kırılmasına veya çökmesine yol açarak hastanın yaralanmasına neden olabilir.
- Hasta pronken son kullanıcının yaralanmasından kaçınmak için yatağı ayak barı tutamağından itin. Ayrıca Fowler (hasta destek yüzeyinin baş ucu) kaldırıldığında yatağı baş ucundan itebilirsiniz.
- Emniyet kemeri veya yan ray bulunmadığından doluyken hasta yatağını hareket ettirirken dikkatli olun.
- Serum askısını çekme/itme cihazı olarak kullanmayın. Ürün hasarı oluşabilir.

## Ürün tanımı

**Emergency Relief Bed**, hasta destek yüzeyiyle birlikte kullanılan ve bir serum askısı içeren elektriksiz, manuel olarak ayarlanabilir bir hastane yatağıdır. Elektriksiz hasta destek yüzeyi, çerçevenin boyutlarına uyar. Bu temel yatak ve yüzey, COVID-19 salgını sırasında hastane yataklarındaki yetersizliğe yanıt olarak geliştirilmiştir.

CE


7600-009-005 Rev A.0

1 TR

## Kullanım endikasyonları

**Emergency Relief Bed**, genel hastanelerde veya yerel, eyalet düzeyinde veya federal duyuru durumlarında geçici acil durum ortamlarında hastaların konumlandırılması, tedavisi, nekaheti, desteklenmesi ve taşınmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ürün, yalnızca COVID-19 salgını süresince kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektriksiz destek yüzeyi, hastanın tedavi ve muayenesi için bir destek yüzeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

## Ürün çizimi

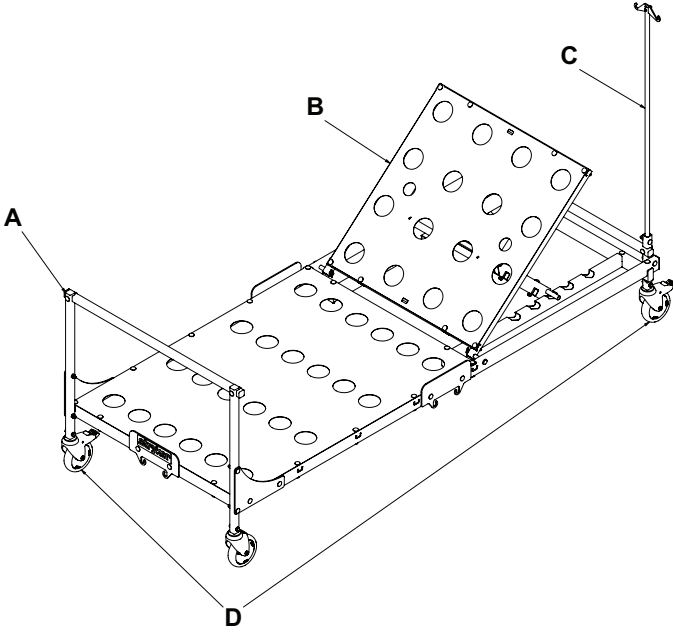

- A Ayak barı tutamağı  
B Fowler  
C Serum askısı  
D Fren tekerleği

## Serum askısını takma

1. Rue ring maşalı veya çatal pimi serum askısı soketinden çıkarın.
2. Serum askısını (C) serum askısı soketine takın.

3. Rue ring maşalı veya çatal pimi serum askısını sabitlemek için serum askısı soketine tekrar takın.

## Temizlik

Önerilen temizlik yöntemi:

1. Ürünün tüm ekspozit yüzeylerini yumuşak bir deterjan püskürterek veya önceden deterjana batırılmış mendillerle elde yıkayın.
2. Uygun temas süresi ve durulama gereklilikleri için temizlik solüsyonu üreticisinin talimatını izleyin.
3. Yeniden kullanıma almadan önce ürünün kurummasını bekleyin.

**Not** - Aşırı satürasyondan kaçının. Ürünü ıslak bırakmayın.

## Dezenfeksiyon

Bu ürünün yüzeyleri için önerilen dezenfektanlar:

- <math>\leq 3\%</math> glkol eter içeren kuaterner (etken madde - amonyum klorür)
- Fenolik (etken madde - o-fenilfenol)
- Klorlu çamaşır suyu solüsyonu (%5,25 - 100 birim suda 1 birimden az çamaşır suyu)
- Alkol (etken madde - %70 izopropil alkol)

Önerilen dezenfeksiyon yöntemi:

1. Dezenfektan solüsyon üreticisinin seyreltme önerilerine uyun.
2. Önerilen dezenfektan solüsyonu püskürterek veya önceden solüsyona batırılmış mendillerle uygulayın.
3. Ürünün tüm ekspozit yüzeylerini önerilen dezenfektanla elde yıkayın.
4. Yeniden kullanıma almadan önce ürünün kurummasını bekleyin.

## Not

- Aşırı satürasyondan kaçının. Ürünü ıslak bırakmayın.
- Uygun temas süresi ve durulama gereklilikleri için üreticinin seyreltme önerilerine uyun. Düzgün dezenfeksiyon için kimyasal üreticisinin kılavuzlarına uyun.



Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002  
USA

EC REP

Stryker European Operations Limited  
Anngrove, IDA Business & Technology Park  
Carrigtwohill, Co Cork, T45 HX08  
Ireland